

3-σε-1 Φορητός Υπέρηχος με Διπλή Κεφαλή

KONTED C10TX

Εξερευνώντας πέρα από το ορατό

1 x
182g

2 x
128 Στοιχεία

3 x
Πιστοποιήσεις



Το Μέλλον του Υπέρηχου Χωράει στην Τσέπη



Η Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd ιδρύθηκε το 2014. Είναι μια υψηλής τεχνολογίας εταιρεία που εστιάζει στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση φορητών υπερήχων.

Καινοτόμα Σύλληψη

Πρωτοποριακός σχεδιασμός

Μικρότερο από ένα iPhone, πιο ισχυρό απ' όσο φανταστήκατε



Εξαιρετικά ελαφρύ

Μόνο 182g, ελαφρύτερο από τα περισσότερα smartphones



Μπαταρία

Μπαταρία Λιθίου 2800mAh με δυνατότητα ασύρματης φόρτισης



Στο Μέγεθος τσέπης

Μικρότερο από ένα iPhone, χωράει στην τσέπη σας



Διπλής Κεφαλής

Κυρτή, γραμμική και καρδιακή συστοιχία σε μία μόνο συσκευή



Τεχνική Υπεροχή

Τρεις Κεφαλές. Μία Συσκευή

Επαγγελματική απόδοση σε συσκευή τσέπης



ΚΥΡΤΗ

Frequency: 3.2/5MHz
Depth: 90-305mm
Radius: R45

Applications

Κοιλιακή απεικόνιση

Μαιευτική

Γενική διάγνωση

Ουρολογία

Πνευμονολογία

Νευρολογία



ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Frequency: 7.5/10MHz
Depth: 20-100mm
Lenth: 28mm

Applications

Μυοσκελετικό

Αγγεία

Επιφανειακές δομές

Θυροειδής

Παιδιατρική

Καρωτίδα

Νεύρα



ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Frequency: 2.5/5MHz
Depth: 90-160mm
Footprint: 25x16mm

Applications

Ηχοκαρδιογραφία

Καρδιακή απεικόνιση



Αδιαβροχοποίηση: IP68



Αντιολισθητικός σχεδιασμός



Ενσωματωμένη ψυκτική επίστρωση

Απρόσκοπτη Συνδεσιμότητα

Παγκόσμια Συνδεσιμότητα

Συνδεθείτε με οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

Διπλή Συνδεσιμότητα



Wi-Fi

Ενσωματωμένο Wi-Fi
802.11g/20MHz
5 Συμβατό με 5G
Ρυθμός μεταφοράς: 450Mbps



USB-C

USB Type-C

Διπλές θύρες USB-C
Γρήγορη μεταφορά δεδομένων
Φόρτιση κατά τη χρήση
Πλήρης συμβατότητα με κάθε συσκευή

Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας



Μπαταρία

Ενσωματωμένη μπαταρία
Υποστήριξη ασύρματης φόρτισης
Λειτουργία κατά τη φόρτιση
Παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας

Συμβατότητα Λειτουργικών Συστημάτων



iOS 11.0 or later

iPhone 7+ to iPhone 16+ series, iPad Air 2, iPad mini-5, iPad Pro series



Android 14 or later

Συμβατό με τα περισσότερα σύγχρονα smartphone και tablet Android



Windows 10 or later

Πλήρης συμβατότητα με υπολογιστές και tablet Windows



Εμπιστοσύνη & Αξιοπιστία

Διασφάλιση Ποιότητας

Ενσωματώνει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα

Τριπλή Πιστοποίηση

Ο φορητός υπέρηχος KONTED C10TX πληροί τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διαχείριση ποιότητας



US Food & Drug
Administration



European Conformity



International Standards
Organization

Δέσμευση Ποιότητας

Πρώτα η Ασφάλεια



Οι αυστηροί έλεγχοι διασφαλίζουν την ασφάλεια του ασθενούς και του χειριστή σε κάθε κλινικό περιβάλλον.


Μηχανική ακριβείας



Οι προηγμένες διαδικασίες κατασκευής διασφαλίζουν σταθερή απόδοση και αξιοπιστία.

MYUSG App: Το Κέντρο Διαγνωστικών Ελέγχων

Διαισθητική διεπαφή

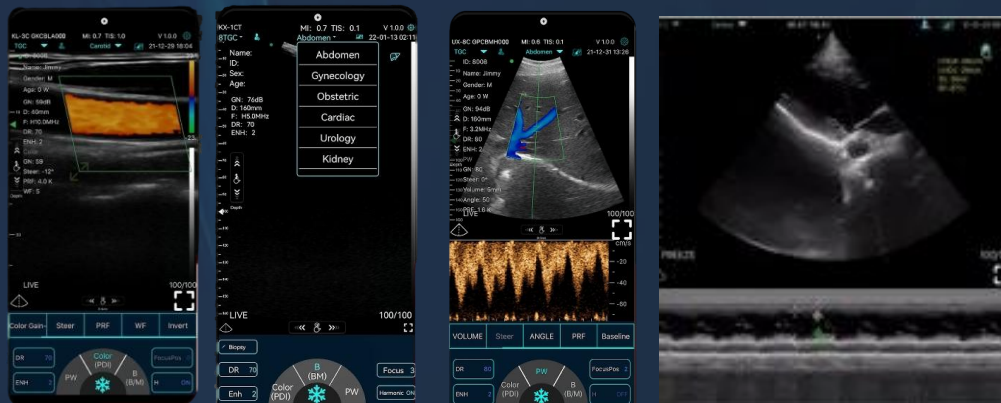

Download on
App Store

50K+
Downloads

Get it on
Google Play

Display Mode:

B, B+B, B+M, Color, PW, PDI,
B+Color+PW

Measurements:

B: Length, Area/Circumference, Angle,
Trace, Distance
GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW(BPD,FL)

B+M: Heart rate, Time, Distance,
LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV)

B+PW: Velocity, Heart rate (2), S/D,
Depth

Βασικά χαρακτηριστικά



Playback Frames
100/200/500/1000 optional



Login Password Function
Ad επιλογές κωδικού πρόσβασης
Διαχειρίσιμη και χειριστών



Multilanguage Support
Πολύγλωσση διεπαφή
Η ελληνική γλώσσα δεν
είναι διαθέσιμη ακόμη



Multiple Formats
JPG, MP4, DICOM



Playback Modes
Αυτόματη και χειροκίνητη αναπαραγωγή

Προηγμένες δυνατότητες



Measurements
Ακριβής απόσταση, εμβαδόν και άλλες
παραμέτρους



Sharing
Ασφαλής κοινή χρήση μέσω email ή PACS



Image Controls
Βελτίωση της ενίσχυσης, του
βάθους και της εστίασης



Auto VTI measurement
Για την αξιολόγηση της λειτουργίας της καρδιακής
βαλβίδας, της καρδιακής παροχής και της
αιμοδυναμικής κατάστασης



Volume Measurement
Σε λειτουργία διπλής οθόνης, μετράται
το μήκος + πλάτος σε μία εικόνα
και το ύψος στη δεύτερη

Ευέλικτη Διάγνωση

Επαγγελματική απεικόνιση σε πολλαπλές ειδικότητες.



Καρδιολογική

B-mode καρδιακή απεικόνιση
Έγχρωμο Doppler
Doppler παλμικού κύματος (PW)
Ηχοκαρδιογραφία



Κοιλιακή Περιοχή

Αξιολόγηση του ήπατος
Απεικόνιση νεφρών
Οπτικοποίηση ουροδόχου κύστης
Γενική κοιλιακή σάρωση



Αγγειακή

Αξιολόγηση αρτηριών
Φλεβική αξιολόγηση
Ροή έγχρωμου Doppler
Περιφερικές αγγειακές μελέτες



Μυοσκελετικό Σύστημα

Κοινή αξιολόγηση
Αξιολόγηση τένοντα
Οπτικοποίηση νεύρων
Εφαρμογές αθλητρικής



Μαιευτική Φροντίδα

Ασφαλής, αξιόπιστη απεικόνιση
εμβρύου εξαιρετικής ευκρίνειας για
μαιευτική αξιολόγηση.



Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Μειώστε ενδεχομένως την ανάγκη
για παραπομπές με γρήγορες και
αξιόπιστες αξιολογήσεις.

Το μέλλον των υπερήχων

Διάγνωση Χωρίς Όρια Η Ιατρική Εξέλιξη στην Παλάμη Σου

Ο φορητός υπέρηχος **Konted C10TX** δεν θα αλλάξει απλά τον τρόπο της απεικόνισης.

Θα μεταμορφώσει το πού και πότε η διαγνωστική απεικόνιση είναι δυνατή.

Από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έως τις απομακρυσμένες κλινικές,

το υψηλής ποιότητας υπερηχογράφημα είναι τώρα εφικτό.

Αποκλειστική Αντιπροσώπευση & Διανομή



Avittia IKE

Για την Ελλάδα και την Κύπρο



Μεταμορφώσεως Σωτήρος 21
17455 Αλιμος, Ελλάδα

Ανίττια

+30 210 9822087

corporate@avittia.com

www.avittia.com

